NEW K-Tape The Original 4 Rolls Brochure FOR PACKAGING PRINT.pdf 1 2020-03-06 1:53 PM



NEW K-Tape The Original 4 Rolls Brochure FOR PACKAGING PRINT.pdf 2 2020-03-06 1:53 PM



NEW K-Tape The Original 4 Rolls Brochure FOR PACKAGING PRINT.pdf 3 2020-03-06 1:53 PM

The Original K-Tape created by Kumbrink is recognized worldwide for its optimum quality and performance. Often copied but never matched.

Das Original K-Tape von Kumbrink ist weltweit bekannt für seine optimale Qualität und Leistung. Oft kopiert aber nie erreicht.

biviax®

NEW K-Tape The Original 4 Rolls Brochure FOR PACKAGING PRINT.pdf 4 2020-03-06 1:53 PM




NEW K-Tape The Original 4 Rolls Brochure FOR PACKAGING PRINT.pdf 5 2020-03-06 1:54 PM



NEW K-Tape The Original 4 Rolls Brochure FOR PACKAGING PRINT.pdf 6 2020-03-06 1:54 PM



NEW K-Tape The Original 4 Rolls Brochure FOR PACKAGING PRINT.pdf 7 2020-03-06 1:54 PM

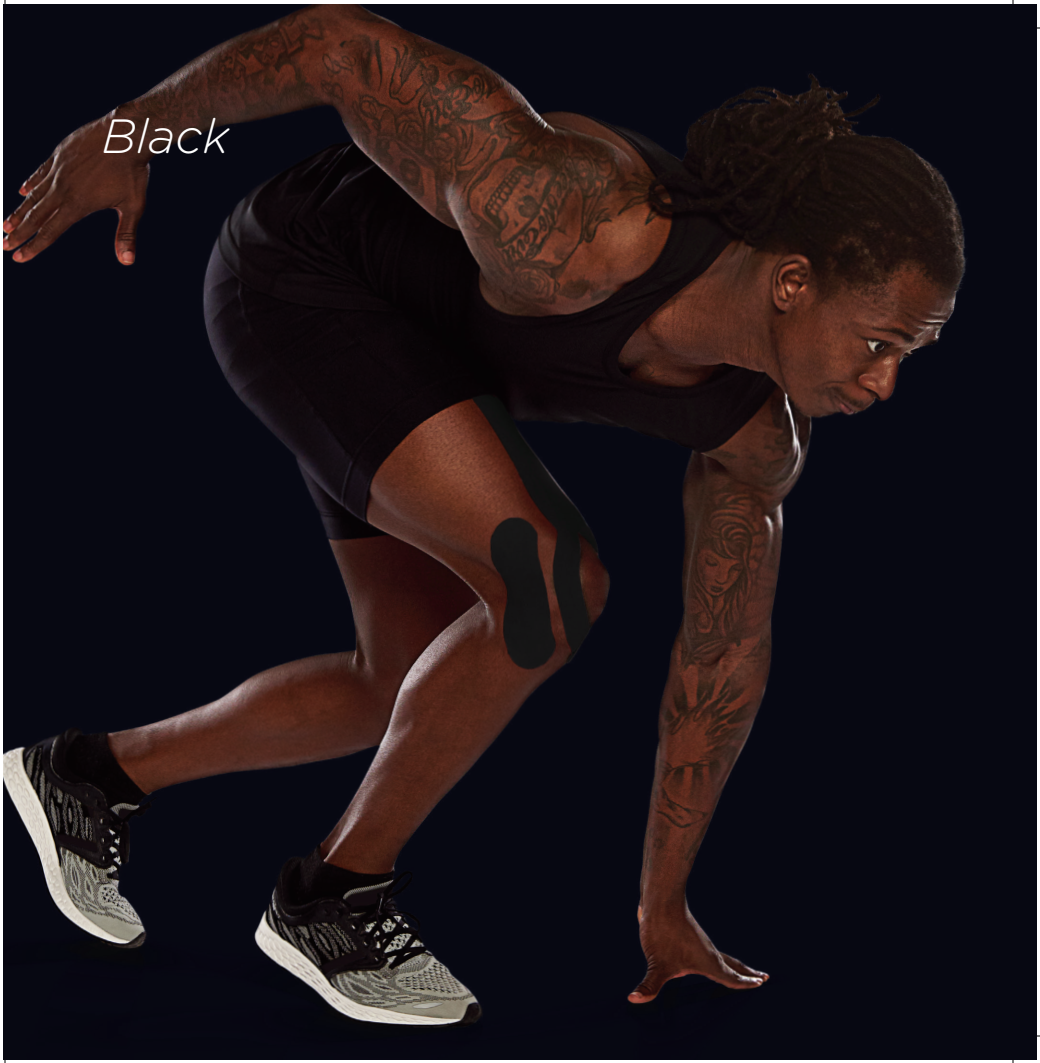

NEW K-Tape The Original 4 Rolls Brochure FOR PACKAGING PRINT.pdf 8 2020-03-06 1:54 PM




NEW K-Tape The Original 4 Rolls Brochure FOR PACKAGING PRINT.pdf 9 2020-03-06 1:54 PM

The Original

- *Elastic cotton tape for professional use*
- *Water resistant*
- *Sweat-permeable & breathable*
- *Medication free*
- *No active ingredients*
- *Physiobond acrylic glue*
- *96% cotton, 4% spandex*

- *Elastisches Baumwolltape für professionelle Anwendung*
- *Wasserresistent*
- *Schweißdurchlässig & atmungsaktiv*
- *Medikamentenfrei*
- *Frei von Wirkstoffen*
- *Physiobond Acrylatkleber*
- *96% Baumwolle, 4% Elastan*

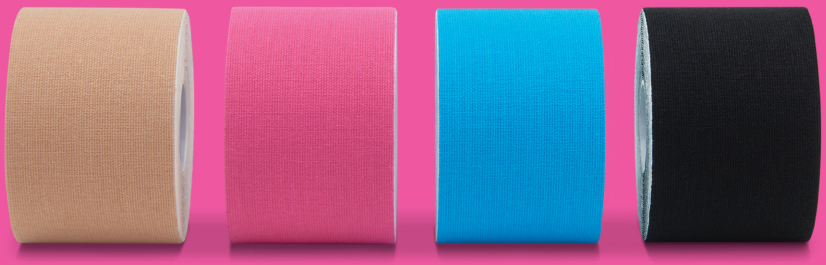

NEW K-Tape The Original 4 Rolls Brochure FOR PACKAGING PRINT.pdf 10 2020-03-06 1:54 PM

K-Tape is an innovative product, recognized worldwide for its optimum quality and performance. The Kumbrink developed original K-Tape combines the best natural, raw materials with the most advanced manufacturing process available.

K-Tape ist ein innovatives Produkt, weltweit bekannt für seine optimale Qualität und Performance. Das Original Kumbrink K-Tape vereint beste Rohstoffe mit bestmöglicher Fertigung.

Notes

- K-Tape is applied to the skin via a skin-friendly acrylic coating and can be worn for several days.
- K-Tape should only be applied by trained K-Taping therapists.
- In rare cases skin irritation or discoloration can occur.
- Improper use can cause skin lesions.
- If the skin does react to the tape, remove the tape immediately and consult a physician if necessary.
- Apply 30-60 minutes before sporting activities.
- Do not apply to skin affected by any skin condition or irritation.
- Do not apply to open wounds or bleeding areas of the body.
- Do not dry the tape with a hairdryer following showering or bathing.
- Swab wet tape dry. Do not rub as this may loosen tape ends.
- Non-sterile.
- For single use only.

More information at **www.k-tape.com**

NEW K-Tape The Original 4 Rolls Brochure FOR PACKAGING PRINT.pdf 11 2020-03-06 1:54 PM

Hinweise

- K-Tape´s werden über eine hautfreundliche Acrylbeschichtung auf der Haut aufgeklebt und können mehrere Tage getragen werden.
- K-Tape sollte nur von ausgebildeten K-Taping Therapeuten verwendet werden.
- In seltenen Fällen kann es zu Hautirritationen oder Hautverfärbungen kommen.
- Unsachgemäße Anwendung kann zu Hautverletzungen führen.
- Bei Hautreaktionen Tape sofort entfernen und gegebenenfalls einen Arzt befragen.
- 30-60 Minuten vor sportlichen Aktivitäten aufkleben.
- Nicht verwenden bei Hauterkrankungen und Reizungen.
- Nicht auf offene Wunden oder blutende Körperstellen kleben.
- Nach dem Duschen oder Baden das Tape nicht mit dem Föhn trocknen.
- Nasses Tape trockentupfen. Nicht reiben, da sich dadurch die Tapeenden ablösen können.
- Nicht steril.
- Nur für einmalige Anwendung.

Weitere Informationen finden Sie unter **www.k-tape.com**

Remarques

- Le K-Tape est posé sur la peau par l'intermédiaire d'une couche de colle acrylique qui respecte la peau, et peuvent être portés pendant plusieurs jours.
- Le K-Tape ne peut être posé que par les thérapeutes formés au K-Taping.
- Dans de rares cas, on peut observer une irritation ou une décoloration de la peau.
- Une utilisation incorrecte peut provoquer des lésions cutanées.
- Si la peau présente une réaction au tape, enlevez-le immédiatement et consultez unmédecin si nécessaire.
- Posez le tape 30-60 minutes avant les activités sportives.
- Ne pas poser de tape sur une peau présentant une pathologie dermatologique ou une irritation.
- Ne pas poser de tape sur une plaie ouverte ou une région du corps présentant un saignement.
- Ne séchez pas le tape avec un sèche-cheveux après la douche ou le bain.
- Sécher le tape en le tapotant. Ne le frottez pas, cela pourrait décoller les extrémités.
- Non stérile.
- À usage unique seulement.

Plus d'informations sur **www.k-tape.com**

NEW K-Tape The Original 4 Rolls Brochure FOR PACKAGING PRINT.pdf 12 2020-03-06 1:54 PM

Instrucciones

- K-Tape's estar provista de una capa de acrílico adhesivo inocuo para la piel y se puede usar durante varios días.
- Se recomienda que K-Tape sea aplicado por terapeutas cualificados.
- En casos raros, la aplicación de la cinta puede causar irritación o decoloración de la piel.
- La aplicación incorrecta pude causar daños a la piel.
- Cuando las reacciones de la piel no desaparezcan de inmediato se recomienda consultar a unmédico.
- Las aplicaciones de K-Taping deben realizarse aproximadamente 30-60 minutos antes de la actividad deportiva.
- No utilizar en caso de enfermedades de la piel y irritación de la piel.
- No aplicar en heridas abiertas o partes del cuerpo sangrantes.
- Después de ducharse o bañarse no usar el secador de pelo sobre la cinta.
- Seque la cinta húmeda tapándola. No frote con la toalla, evitará que la cinta termine despegándose.
- No esterilizado.
- Para un solo uso.

Encontrarámás información en
www.k-tape.com

Indicazioni

- K-Tape viene incollato sulla cute con un rivestimento acrilico a elevata tollerabilità e può essere indossato più giorni.
- K-Tape deve essere applicato soltanto da terapisti con formazione K-Taping.
- In rari casi possonomanifestarsi irritazioni o discromie della cute.
- L'impiego non corretto può generare lesioni cutanee.
- Qualora si verificassero reazioni cutanee rimuovere subito il tape e all'occorrenza richiedere un consulto unmedico.
- Incollare 30-60 minuti prima dell'attività sportiva.
- Non incollare il tape in caso dimalattie cutanee e irritazioni.
- Non incollare il tape su ferite aperte o su parti sanguinanti.
- Non asciugare il tape con il fon dopo la doccia o il bagno.
- Tamponare senza strofinare il tape bagnato per evitare che le estremità del tape si stacchino.
- Non sterile.
- Solo per impiegomonouso.

Maggiori informazioni su
www.k-tape.com

NEW K-Tape The Original 4 Rolls Brochure FOR PACKAGING PRINT.pdf 13 2020-03-06 1:54 PM

Opmerkingen

- K-Tape's zijn voorzien van een huidvriendelijke acryl-kleeflaag en kunnenmeerdere dagen gedragen worden.
- Hetwordt aanbevolen K-Tape alleen door gekwalificeerd en opgeleide therapeuten op te laten brengen.
- In zeldzame gevallen kann de toepassing van de tape leiden tot irritatie of verkleuring van de huid.
- Onjuiste teoepassing kann tot beschadiging van de huid leiden.
- Bij huidreacties de tape onmiddelijk verwijderen en een arts consulteren.
- De K-Taping applicaties dienen ongeveer 30-60 minuten voor de sportactiviteit te worden aangebracht.
- Niet toepassen bij huidziektes en irritatie van de huid.
- Niet toepassen op open wonden of bloedende wonden.
- Na het douchen of zwemmen geen föhn gebruiken.
- De nog vochtige tape droog deppen. Dezemag niet met de handdoek drooggewreven worden, zodat de tape-uiteinden niet los laten.
- Niet steril.
- Geschikt vor eenmalige toepassing.

Meer informatie kan gevonden worden op **www.k-tape.com**

Indicações

- K-Tape é aplicado sobre a pele com um revestimento acrílico com tolerabilidademelhorada e pode ser usadomais do que umdia.
- A fita K-Tape deve ser so aplicado por terapeutas formados em K-Taping (médicos).
- Emcertos casos, pode ocorrer a irritações da pele ou descolorações.
- Uso inadequado pode causar ferimentos graves.
- Emreacções cutâneas remove a fita imediatamente e opcionalmente consulte ummédico.
- Colagem 30-60 minutos antes de atividades desportivas.
- Não utilizar emdoenças e irritações dermatologicas.
- Não aplicar emferidas abertas ou partes sangrentas.
- Não secar a fita comumsecador após do banho ou duche.
- Enxugar a fitamolhada comumpano para secar. Não esfregar, pois tal poderia tornar as pontas da fita lassas.
- Não esterilizado.
- Para aplicação única.

Paramais informações, consulte **www.k-tape.com**

NEW K-Tape The Original 4 Rolls Brochure FOR PACKAGING PRINT.pdf 14 2020-03-06 1:54 PM



NEW K-Tape The Original 4 Rolls Brochure FOR PACKAGING PRINT.pdf 15 2020-03-06 1:54 PM

New



K-Tape® Pure

Natural Color-free Cotton

Designed for people who demand the purest, color-free, 100% natural cotton.



NEW K-Tape The Original 4 Rolls Brochure FOR PACKAGING PRINT.pdf 16 2020-03-06 1:55 PM



biviax®

biviax GmbH & Co. KG
Hagener Straße 428
44229 Dortmund
Germany

www.k-tape.com

CE

© K-Tape, K-Tape My Skin and Physiobond are registered trademarks in Germany, Europe, USA, Canada and many more countries. All rights reserved.