INSTRUCTIONS FOR USE

EMBRACE PRE-FILLED FLUSH SYRINGE

0.9% sodium chloride injection




- PRE-FILLED FLUSH SYRINGE
- VORGEFÜLLTE SPÜLSPRITZE
- SERINGUE DE RINÇAGE PRÉ-REMPLIE
- JERINGA DE IRRIGACIÓN PRE-LLENADA
- SIRINGA DI LAVAGGIO PRERIEMPITA
- Seringa pré-cheia flush
- VOORGEVULDE SPOELSPUIT
- ELŐRETÖLTÖTT ÖBLITŐ FECSKENDŐ
- FÖRFYLLD SPOLSPRUTA
- FORFYLDT SKYLLESPRØJTE
- ESITÄYTETTY HUUHTELURUISKU
- WSTĘPNIE NAPEŁNIONA STRZYKAWKA DO PRZEPŁUKIWANIA
- PŘEDNAPLNĚNÁ PROPLACHOVACÍ STŘÍKAČKA
- PREDNAPLNENÁ PREPLACHOVACIA STRIEKAČKA
- ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА ЗА ПРОМИВАНЕ
- PREDNAPOLNJENA BRIZGA ZA IZPIRANJE
- ÖNCEDEN DOLDURULMUŞ YIKAMA ENJEKTÖRÜ
- ПОПЕРЕДНЬО НАПОВНЕНИЙ ШПРИЦ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ
- ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΥΣΗΣ
- ÖNCEDEN DOLDURULMUŞ YIKAMA ENJEKTÖRÜ

1

PRE-FILLED FLUSH SYRINGE

PRODUCT STRUCTURE:

1. Protective Tip Cap - Luer Lock
2. 0.9% sodium chloride injection
3. Syringe Barrel
4. Piston
5. Plunger Rod

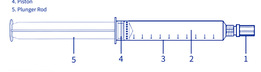

INTENDED USE:
The device is used for closing and flushing the end of catheters at intervals of different drug treatment.

CONTRAINDICATIONS: None

PRECAUTIONS:

1. The use of the product must meet the requirements of relevant operational specifications and relevant regulations of medical department, and be restricted to trained doctors or nurses.
2. Check for package integrity. It is strictly prohibited to use if product package is damaged, or the syringe breaks, leaks, disintegrates.
3. It is strictly prohibited to use if protective tip cap is not installed correctly, loose or falls off.
4. Visual examination for clarity of solution, if solution discolouration, turbidity, precipitation or any form of suspended particulate matter material appears-DO NOT USE.
5. DO NOT RE-STERILIZE
6. Please use the product within the validity period. The product batch number, production date and expiration date are shown on the product packaging label.
7. It is strictly prohibited to re-use. Single use only, and discard any unused remaining solution.
8. Check the compatibility of 0.9% sodium chloride solution with drugs. Direct contact with drugs incompatible with 0.9% sodium chloride injection is strictly prohibited.
9. It is strictly prohibited to be used for subcutaneous and intramuscular injection and dispensing. Only for flushing of IV-set catheters. It is not for medication dilutions, nor for dry product reconstitution.
10. DO NOT PLACE THE PRODUCT ON A STERILE FIELD.
11. Do not use if you are allergic to the sodium chloride solution.
12. Reuse of single use devices creates a potential risk for the patient or user. It may cause contamination and/or impairment of function; which may lead to injury, illness and/or death of a patient.
13. If a serious incident has occurred in relation to the device, it should be reported to Medline and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.
14. Precautions should be taken when discarding this device and disposal of the device shall be made in accordance with applicable hospital or national regulations for biologically hazardous waste.

⚠	Caution	⊘	Do not use if package is damaged
EC REP	Authorized representative in the European Community	LOT	Lot number
CE 0123	CE Mark: conforms to essential requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC	⊘	Do not re-sterilize
	Date of manufacture		Consult instructions for use
	Manufacturer		Keep away from sunlight
	Use-by date	REF	Catalogue number
	Keep dry	STERILE R	Sterile irradiation using ionizing beams
	Do not re-use		Store at controlled temperature(20-30°C).

Jiangsu Embrace Science & Technology Development Co., Ltd.
29-2 Yinghin Road, Huai'an Economic and Technological Development Zone, Jiangsu, Zip Code: 223001
www.emtdi.cn

EC REP **Riomavis S.L.**
Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039 Spain
Tel.: +34 658 396 230


CH REP **MedNet SWISS GmbH**
Grabenstrasse 3, 6039 Root D4, Switzerland

CE 0123

VORGEFÜLLTE SPÜLSPRITZE

PRODUKTSTRUKTUR:

1. Spitzenschutzkappe -Luer Lock
2. 0,9 % Natriumchlorid-Injektion
3. Spritzenmantel
4. Kolben
5. Spritzenstempel

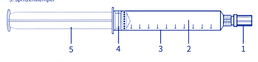

VORGESEHENE VERWENDUNG:
Das Instrument wird zum Verschluss und zur regelmäßigen Spülung der Endpunkte von Kathedern verwendet, die zu verschiedenen medizinischen Behandlungen dienen.

GEGENANZEIGEN: Keine

VORSICHTSMASSNAHMEN:

1. Die Verwendung des Produktes muss den Anforderungen der entsprechenden Bedienspezifika tionen und gültigen Vorschriften der medizinischen Abteilung entsprechen und ist beschränkt auf ausgebildete Ärzte und Krankenschwestern.
2. Prüfen Sie die Verpackung auf Unversehrtheit. Es ist strengstens verboten, das Produkt zu verwenden, wenn die Produktverpackung beschädigt ist, die Spritze zerbrochen ist, ausläuft oder zerfällt.
3. Die Verwendung ist strengstens verboten, wenn die Spitzenschutzkappe nicht korrekt angebracht, lose ist oder abfällt.
4. Sichtkontrolle der Klarheit der Lösung, sollte die Lösung verfärbt oder getrübt sein, Ausfall oder irgendeine Form von besonderer Materie aufweisen-NICHT VERWENDEN.
5. NICHT ERNEUT STERILISIEREN
6. Bitte verwenden Sie das Produkt innerhalb des Gültigkeitszeitraums. Die Losnummer des Produkts, Produktionsdatum und Ablaufdatum sind auf dem Etikett der Produktverpackung angegeben.
7. Eine Wiederverwendung ist strengstens verboten. Nur eine einzige Verwendung und die Entsorgung nicht gebrauchter Lösungsbestände.
8. Prüfen Sie die Verträglichkeit der 0,9 % Natriumchlorid-Lösung mit den Medikamenten. Der direkte Kontakt mit Medikamenten, die nicht mit der 0,9 % Natriumchlorid-Lösung kompatibel sind, ist strengstens verboten.
9. Es ist strengstens verboten, für subkutane oder intramuskuläre Injektionen und Verabreichung verwendet zu werden. Nur zur Spülung intra-vaskulärer Katheter. Es ist weder für medizinische Verdünnungen, noch für Rekonstitution von Trockenprodukten geeignet.
10. PLATZIEREN SIE DAS PRODUKT NICHT IN EINEM STERILEN FELD.
11. Nicht verwenden, wenn Sie allergisch gegenüber der Natriumchlorid-Lösung sind.
12. Das Wiederverwenden von zur einmaligen Verwendung bestimmten Produkten stellt ein potentielles Risiko für Patient und Anwender dar. Es kann zu einer Kontamination und/oder Beeinträchtigung der Funktion kommen, was zu Verletzungen, Krankheit und/oder Tod eines Patienten führen kann.
13. Wenn ein schwerwiegender Vorfall in Bezug auf das Produkt aufgetreten ist, sollte dies Medline und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer und / oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.
14. Wenn das Produkt entsorgt wird, sind Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, die den geltenden Krankenhaus - oder nationalen Vorschriften für kontaminierte Abfälle entsprechen.

⚠	Vorsicht	⊘	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
EC REP	Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft	LOT	Losnummer
CE 0123	CE-Kennzeichnung entspricht den grundsätzlichen Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für medizinische Geräte	⊘	Nicht erneut sterilisieren
	Herstellungsdatum		Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitung
	Hersteller		Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
	Verfallsdatum	REF	Katalognummer
	Trocken aufbewahren	STERILE R	Medizinisch sicher durch Ionisierungsstrahlen
	Nicht wiederverwenden		Lagerung bei stabiler Temperatur (20-30°C).

Jiangsu Embrace Science & Technology Development Co., Ltd.
29-2 Yinghin Road, Huai'an Economic and Technological Development Zone, Jiangsu, Zip Code: 223001
www.emtdi.cn

EC REP **Riomavis S.L.**
Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039 Spain
Tel.: +34 658 396 230


CH REP **MedNet SWISS GmbH**
Grabenstrasse 3, 6039 Root D4, Switzerland

CE 0123

SERINGUE DE RINÇAGE PRÉ-REMPLIE

STRUCTURE DU PRODUIT:

1. Capuchon protecteur -Luer Lock
2. Injection chlorure de sodium 0,9%
3. Barillet de seringue
4. Piston
5. Tige du piston

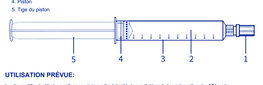

UTILISATION PRÉVUE:
Le dispositif est utilisé pour fermer et rincer l'extrémité des cathéters à des intervalles de différents traitements médicamenteux.

CONTRE-INDICATIONS: Aucune

PRÉCAUTIONS:

1. L'utilisation du produit doit répondre aux exigences des spécifications opérationnelles pertinentes et des réglementations pertinentes du service médical, et limitée aux médecins ou infirmières formés.
2. Vérifiez l'intégrité de l'emballage. Il est strictement interdit d'utiliser le produit si l'emballage est endommagé, ou si la seringue est cassée, fuit, se désintègre.
3. Il est strictement interdit d'utiliser le produit si le capuchon de protection n'est pas correctement installé, s'il est desserré ou se détache.
4. Examen visuel pour la clarté de la solution, si une décoloration de la solution, de la turbidité, précipitations ou toute forme de matière particulaire en suspension apparaît, il ne faut pas utiliser le produit.
5. Ne pas restériliser le produit.
6. Veuillez utiliser le produit pendant la période de validité. Le numéro de lot, la date de production et la date de péremption sont indiqués sur l'étiquette d'emballage du produit.
7. Il est strictement interdit de réutiliser le produit. A usage unique uniquement et il faut jeter toute solution restante inutilisée.
8. Vérifiez la compatibilité de la solution de Chlorure de Sodium à 0.9% avec les médicaments. Le contact direct avec des médicaments incompatibles avec l'injection de Chlorure de Sodium à 0.9% est strictement interdit.
9. Il est strictement interdit d'utiliser le produit pour l'injection et la distribution sous-cutanée et intramusculaire. Uniquement pour le rinçage des cathéters intraveineuses. Il n'est pas destiné aux dilutions de médicaments, ni à la reconstitution de produits secs.
10. Ne pas placer le produit sur un champ stérile.
11. Ne pas utiliser si vous êtes allergique à la solution de Chlorure de Sodium.
12. La réutilisation de dispositifs à usage unique est dangereuse pour le patient ou l'utilisateur. Ils peuvent être contaminés et/ou ne plus fonctionner correctement, ce qui peut entraîner blessures, maladies et/ou mort du patient.
13. Si un incident grave est survenu en lien avec le dispositif, il doit être reporté à Medline et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.
14. Des précautions doivent être prises lors de la mise au rebut de ce dispositif. L'élimination de celui-ci doit être faite conformément aux réglementations hospitalières et nationales applicables aux déchets biologiquement dangereux.

⚠	Attention	⊘	N'utilisez pas le produit si l'emballage est endommagé
EC REP	Représentant autorisé dans la Communauté européenne	LOT	Numéro de lot
CE 0123	Marquage CE : conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux	⊘	Ne ré-stérilisez pas
	Date de fabrication		Consultez le mode d'emploi
	Fabricant		Gardez à l'abri de la lumière du soleil
	Date limite d'utilisation	REF	Numéro de catalogue
	Conservez au sec	STERILE R	Médicament stérilisé contient un rayonnement ionisant
	Ne réutilisez pas		Conservez à température contrôlée (10 - 30 °C)

Jiangsu Embrace Science & Technology Development Co., Ltd.
29-2 Yinghin Road, Huai'an Economic and Technological Development Zone, Jiangsu, Zip Code: 223001
www.emtdi.cn

EC REP **Riomavis S.L.**
Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039 Spain
Tel.: +34 658 396 230

CH REP **MedNet SWISS GmbH**
Grabenstrasse 3, 6039 Root D4, Switzerland

CE 0123

DURÉE D'UTILISATION: 3 ans

DATE DE PRODUCTION: Référez-vous à l'étiquette de l'emballage.

MÉTHODE DE STÉRILISATION: Stérilisation à la vapeur.

LAGERUNG: Conservez à température contrôlée (10 - 30 °C). Ne congelez pas.

MODE D'EMPLOI:

(SUIVEZ UNE TECHNIQUE ASEPTIQUE TOUT AU LONG DE LA PROCÉDURE)

1. Ouvrez l'emballage de la seringue et retirez la seringue, vérifiez la clarté de la solution, vérifiez que le capuchon protecteur de l'embout est en place.
2. Poussez la tige du piston vers le haut pour libérer le joint entre le piston et le barillet avant de retirer le capuchon protecteur de l'embout.
3. Retirez le capuchon protecteur de l'embout en le tournant de manière aseptique.
4. Expulsez l'air en poussant le piston vers l'avant.
5. Connectez la seringue de rinçage au cathéter de manière aseptique et poussez la tige du piston pour évacuer le volume requis conformément à la politique de l'institution.
6. Jetez la seringue usagée et la partie résiduelle de la solution. NE RÉUTILISEZ PAS.



⚠	Attention	⊘	N'utilisez pas le produit si l'emballage est endommagé
EC REP	Représentant autorisé dans la Communauté européenne	LOT	Numéro de lot
CE 0123	Marquage CE : conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux	⊘	Ne ré-stérilisez pas
	Date de fabrication		Consultez le mode d'emploi
	Fabricant		Gardez à l'abri de la lumière du soleil
	Date limite d'utilisation	REF	Numéro de catalogue
	Conservez au sec	STERILE R	Médicament stérilisé contient un rayonnement ionisant
	Ne réutilisez pas		Conservez à température contrôlée (10 - 30 °C)

Jiangsu Embrace Science & Technology Development Co., Ltd.
29-2 Yinghin Road, Huai'an Economic and Technological Development Zone, Jiangsu, Zip Code: 223001
www.emtdi.cn

EC REP **Riomavis S.L.**
Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039 Spain
Tel.: +34 658 396 230

CH REP **MedNet SWISS GmbH**
Grabenstrasse 3, 6039 Root D4, Switzerland


CE 0123

Rev.: 2024.04.22

JERINGA DE IRRIGACIÓN PRE-LLENADA

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO:

1. Capuchón protector - Luer Lock
2. Inyección de cloruro de sodio al 0,9%
3. Cilindro
4. Pistón
5. Émbolo

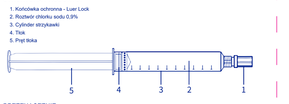

USO PREVISTO:
Este dispositivo se utiliza para estabilizar e irrigar el extremo del catéter a intervalos de diversos tratamientos farmacológicos.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna

ADVERTENCIAS:

1. Este producto debe utilizarse de acuerdo con los requisitos de las especificaciones operacionales relevantes y las normativas pertinentes del departamento médico. Su uso está restringido al personal médico y de enfermería capacitado.
2. Verifique la integridad del embalaje. El uso de este producto está estrictamente prohibido si el embalaje está dañado, o si la jeringa está rota, tiene pérdidas, o se desarma.
3. Está prohibido utilizar este producto si el capuchón protector no está correctamente instalado, está suelto, o se cae.
4. Realice verificación visual para corroborar la claridad de la solución. NO UTILICE si la solución presenta cambios de color, enturbiamiento, precipitación, cualquier tipo de partículas suspendidas.
5. NO VUELVA A ESTERILIZAR
6. Utilice este producto dentro del periodo de validez. El número de lote, fecha de fabricación, y fecha de caducidad se muestran en la etiqueta del embalaje del producto.
7. Está estrictamente prohibido su re-utilización. Para uso único, deseche cualquier solución restante que no se haya utilizado.
8. Verifique que la solución de cloruro de sodio al 0,9% sea compatible con los medicamentos utilizados. Está estrictamente prohibido el contacto con fármacos incompatibles con cloruro de sodio inyectable al 0,9%.
9. Está estrictamente prohibido el uso para inyección subcutánea o intramuscular y dispensación. Utilice solo para irrigación de catéteres intravasculares. No utilice para diluciones farmacológicas o reconstitución de productos secos.
10. NO COLOQUE ESTE PRODUCTO SOBRE EL CAMPO ESTÉRIL.
11. No utilice en caso de alergia a la solución de cloruro de sodio.
12. Reutilizar un producto de un solo uso crea un riesgo potencial para el paciente o usuario. Puede causar contaminación y/ o deterioro de la función, que puede conducir a lesión, enfermedad y / o muerte de un paciente.
13. Si se ha producido un incidente grave en relación con el producto, debe notificarse a Medline y a la autoridad competente del Estado miembro en el que está establecido el usuario y / o el paciente.
14. Se deben tomar precauciones al desechar este producto y la eliminación del producto debe realizarse de acuerdo con las normativas nacionales o del hospital aplicables para desechos biológicamente peligrosos.

⚠	Precaución	⊘	No utilice si el embalaje está dañado
EC REP	Representante autorizado en la Comunidad Europea	LOT	Número de lote
CE 0123	Marcado CE: cumple con los requisitos esenciales de la Directiva sobre Productos Sanitarios 93/42/CEE	⊘	No vuelva a esterilizar
	Fecha de fabricación		Consulte las instrucciones de uso
	Fabricante		Mantenga alejado de la luz solar
	Use antes de	REF	Número de catálogo
	Mantenga seco	STERILE R	Esterilización mediante radiación ionizante
	No vuelva a utilizar		Almacene en temperatura controlada (10-30 °C).

Jiangsu Embrace Science & Technology Development Co., Ltd.
29-2 Yinghin Road, Huai'an Economic and Technological Development Zone, Jiangsu, Zip Code: 223001
www.emtdi.cn

EC REP **Riomavis S.L.**
Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039 Spain
Tel.: +34 658 396 230

CH REP **MedNet SWISS GmbH**
Grabenstrasse 3, 6039 Root D4, Switzerland

CE 0123

SIRINGA DI LAVAGGIO PRERIEMPITA

STRUTTURA DEL PRODOTTO:

1. Cappuccio protettivo della punta -Luer Lock
2. Soluzione iniettabile di cloruro di sodio allo 0,9%
3. Cilindro della siringa
4. Pistone
5. Pistoncino



DESTINAZIONE D'USO:
Il dispositivo viene utilizzato per sigillare e lavare l'estremità del catetere ad intervalli di diversi trattamenti farmacologici.

CONTROINDICAZIONI: Nessuna

PRECAUZIONI:

1. L'uso del prodotto deve rispettare i requisiti relativi alle specifiche operative e alle normative del dipartimento medico ed è limitato a medici o infermieri qualificati.
2. Controllare l'integrità del pacchetto. È severamente vietato l'uso del prodotto se il pacchetto è danneggiato o se la siringa si rompe, perde o si disintegra.
3. È severamente vietato l'uso se il cappuccio protettivo della punta non è installato correttamente, è allentato o cade.
4. Effettuare un controllo della trasparenza della soluzione. Se essa presenta colorazioni anomale, è torbida, è precipitata o ha qualsiasi tipo di materiale particolato in sospensione-NON UTILIZZARE.
5. NON RISTERILIZZARE.
6. Usare il prodotto entro il periodo di scadenza. Il numero di partita, la data di produzione e la data di scadenza sono visibili sull'etichetta dell'imballaggio.
7. È severamente vietato il riutilizzo. Prodotto ad uso singolo, gettare eventuale soluzione residua non utilizzata.
8. Controllare la compatibilità della soluzione di cloruro di sodio allo 0,9% con i farmaci. Il contatto diretto con farmaci incompatibili con la soluzione iniettabile di cloruro di sodio allo 0,9% è severamente vietato.
9. È severamente vietato l'uso per iniezione sottocutanea o intramuscolari è severamente vietato. Da usare solo per il lavaggio di cateteri intravascolari. Non usare per le diluizioni dei farmaci né per la ricostituzione dei prodotti secchi.
10. NON COLLOCARE IL PRODOTTO IN UN CAMPO STERILE.
11. Non utilizzare il prodotto se si è allergici alla soluzione di cloruro di sodio.
12. Il riutilizzo di dispositivi monouso determina un rischio potenziale per il paziente o l'utilizzatore. Può causare contaminazione e/o compromissione della funzione, con conseguenti lesioni, malattie e/o decesso del paziente.
13. Se si verifica un grave incidente in relazione al dispositivo, deve essere segnalato a Medline ed all'autorità competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e / o il paziente è stabilito.
14. È necessario adottare delle precauzioni quando si scarta questo dispositivo e lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative nazionali o ospedaliere per lo smaltimento dei rifiuti biologicamente pericolosi.

⚠	Attenzione	⊘	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
EC REP	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea	LOT	Codice lotto
CE 0123	Marcatura CE: conforme ai requisiti essenziali della direttiva sui dispositivi medici 93/42/EEC.	⊘	Numero di catalogo
	Data di fabbricazione		Consultare le istruzioni per l'uso
	Fabbricante		Tenere al riparo dalla luce del sole
	Data di scadenza	REF	Numero di catalogo
	Mantenere asciutto	STERILE R	Sterilizzato mediante irradiazione ionizzante
	Non riutilizzare		Conservare a temperatura controllata (10-30°C).

Jiangsu Embrace Science & Technology Development Co., Ltd.
29-2 Yinghin Road, Huai'an Economic and Technological Development Zone, Jiangsu, Zip Code: 223001
www.emtdi.cn

EC REP **Riomavis S.L.**
Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039 Spain
Tel.: +34 658 396 230

CH REP **MedNet SWISS GmbH**
Grabenstrasse 3, 6039 Root D4, Switzerland

CE 0123

SERINGA PRÉ-CHEIA FLUSH

ESTRUTURA DO PRODUTO:

1. Tampa protectora da ponta - Encaixe de bloqueio Luer
2. 0,9% cloreto de sódio
3. Corpo de seringa
4. Êmbolo
5. Cabeça do Êmbolo



USO PRETENDIDO:
O dispositivo é utilizado para o flushing de cateteres entre administração de diferentes medicamentos endovenosos.

CONTRA-INDICAÇÕES: Nenhuma

PRECAUÇÕES:

1. A utilização do produto deve satisfazer os requisitos das especificações operacionais relevantes e regulamentos relevantes do departamento médico, e deve ser restrita a médicos ou enfermeiros treinados.
2. Verifique a integridade da embalagem. É estritamente proibida a utilização se a embalagem do produto estiver danificada, ou a seringa partir, vazar, desintegrar.
3. É estritamente proibida a utilização se a tampa protetora da ponta não estiver instalada corretamente, solta ou cair.
4. Exame visual para verificar a clareza da solução. Caso se observe descoloração, turbidez, precipitação ou qualquer forma de material particulado suspenso na solução - NÃO UTILIZE.
5. NÃO VOLTE A ESTERILIZAR
6. Utilize o produto dentro do período de validade. O número do lote do produto, a data de produção e a data de validade são apresentados na etiqueta da embalagem do produto.
7. É estritamente proibido reutilizar. Apenas para utilização única e descarte qualquer solução restante não utilizada.
8. Verifique a compatibilidade da solução de cloreto de sódio a 0,9% com medicamentos. É estritamente proibido o contacto direto com medicamentos incompatíveis com a injeção de cloreto de sódio a 0,9%.
9. É estritamente proibido ser utilizado para injeção subcutânea e intramuscular e dispensação. Apenas para irrigação de cateteres intravasculares. Não é para diluições de medicação, nem para reconstituição de produtos secos.
10. Não colocar no campo estéril.
11. Não utilize se for alérgico à solução de cloreto de sódio.
12. A reutilização de dispositivos de uso único cria um risco potencial para o paciente ou usuário. Pode causar contaminação e / ou comprometimento da função, o que pode levar a lesões, doenças e / ou morte de um paciente.
13. Se ocorrer um incidente grave em relação ao dispositivo, este deve ser reportado à Medline e à autoridade de saúde competente do Estado em que o usuário e / ou o paciente se encontram.
14. Devem ser tomadas precauções ao eliminar este dispositivo e seguir as normas e directrizes hospitalares e nacionais aplicáveis aos resíduos biologicamente perigosos.

⚠	Atenção	⊘	Não utilizar se a embalagem estiver danificada
EC REP	Representante autorizado na Comunidade Europeia	LOT	Número do lote
CE 0123	Marcação CE: cumpre os requisitos essenciais da Diretiva 93/42/CEE relativa a dispositivos médicos	⊘	Não volte a esterilizar
	Data de fabricação		Consulte as instruções de utilização
	Fabricante		Mantenha longe da luz solar
	Prazo de validade	REF	Número de catálogo
	Mantenha seco	STERILE R	Esterilizado por irradiação ionizante
	Não reutilize		Armazene numa temperatura controlada (10-30°C).

Jiangsu Embrace Science & Technology Development Co., Ltd.
29-2 Yinghin Road, Huai'an Economic and Technological Development Zone, Jiangsu, Zip Code: 223001
www.emtdi.cn

EC REP **Riomavis S.L.**
Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039 Spain
Tel.: +34 658 396 230

CH REP **MedNet SWISS GmbH**
Grabenstrasse 3, 6039 Root D4, Switzerland

CE 0123

PRAZO DE VALIDADE: 3 Anos

DATA DE PRODUÇÃO: Consulte a etiqueta da embalagem.

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: Esterilização a vapor.

ARMAZENAMENTO: Armazene numa temperatura controlada (10-30°C). Não congele.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

(SIGA UM MÉTODO ASSÉPTICO DURANTE TODO O PROCEDIMENTO)

1. Abra o pacote da seringa e retire a seringa, verifique a clareza da solução, verifique se a tampa protectora da ponta está no lugar.
2. Empurre a cabeça do êmbolo para cima para libertar a vedação entre o êmbolo e o corpo da seringa antes de retirar a tampa protectora da ponta.
3. Remova a tampa protectora da ponta, torcendo-a assepticamente.
4. Expulse o ar empurrando o êmbolo para a frente.
5. Conecte a seringa de irrigação ao cateter de forma asséptica e empurre a cabeça do êmbolo para irrigar o volume necessário de acordo com a política da instituição.
6. Elimine a seringa usada e a parte residual da solução. NÃO REUTILIZE.



⚠	Cuidado	⊘	Não utilize se a embalagem estiver danificada
EC REP	Representante autorizado na Comunidade Europeia	LOT	Número do lote
CE 0123	Marcação CE: cumpre os requisitos essenciais da Diretiva 93/42/CEE relativa a dispositivos médicos	⊘	Não volte a esterilizar
	Data de fabrico		Consulte as instruções de utilização
	Datum výroby		Mantenha longe da luz solar
	Prazo de validade	REF	Número de catálogo
	Mantenha seco	STERILE R	Esterilizado por irradiação ionizante
	Não reutilize		Armazene numa temperatura controlada (10-30°C).

Jiangsu Embrace Science & Technology Development Co., Ltd.
29-2 Yinghin Road, Huai'an Economic and Technological Development Zone, Jiangsu, Zip Code: 223001
www.emtdi.cn

EC REP **Riomavis S.L.**
Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039 Spain
Tel.: +34 658 396 230


CH REP **MedNet SWISS GmbH**
Grabenstrasse 3, 6039 Root D4, Switzerland

CE 0123

VOORGEVULDE SPOELSPUIT

PRODUCTSTRUCTUUR:

1. Beschermende tipdop - Luer-lock
2. Injectie van natriumchloride 0,9%
3. Cilinder van de spuit
4. Zuiger
5. Plunjerstang

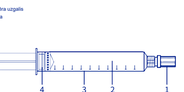

GEBRUIKSDOEL:
Het hulpmiddel wordt gebruikt voor het afsluiten en spoelen van het uiteinde van de katheter bij intervallen van behandeling met verschillende medicijnen.

CONTRA-INDICATIES: Geen

VOORZORGSMAATREGELEN:

1. Het gebruik van het product moet voldoen aan de vereisten van de relevante operationele specificaties en de relevante regelgeving van de medische instantie, en moet worden beperkt tot opgeleide artsen of verpleegkundigen.
2. Controleer de integriteit van de verpakking. Het is ten strengste verboden om dit product te gebruiken als de verpakking beschadigd is, of als de spuit gebroken is, lekt of uiteenvalt.
3. Het is ten strengste verboden om dit product te gebruiken als de beschermende tipdop niet correct is aangebracht, losraakt of afvalt.
4. Visuele inspectie op helderheid van de oplossing: NIET GEBRUIKEN als verkleuring, troebelheid, bezinksel of enige vorm van zwevende deeltjes in de oplossing verschijnt.
5. NIET OPNIEUW STERILISEREN
6. Gebruik het product binnen de geldigheidsperiode. De batchcode van het product, de productiedatum en de vervaldatum staan op het etiket van de productverpakking.
7. Het is ten strengste verboden om het product opnieuw te gebruiken. Enkel voor eenmalig gebruik. Gooi ongebruikte resten van de oplossing weg.
8. Controleer de compatibiliteit van 0,9% natriumchlorideoplossing met de medicijnen. Rechtstreeks contact met medicijnen die niet compatible zijn met de injectie van natriumchloride 0,9 % is ten strengste verboden.
9. Het is ten strengste verboden deze oplossing te gebruiken voor subcutane en intramusculaire injectie en toediening. Uitsluitend bedoeld voor het uitspoelen van intravasculaire katheters. Het is niet bestemd voor de verdunning van medicatie, noch voor reconstituut van droge producten.
10. PLAATS HET PRODUCT NIET OP EEN STERIEL VELD.
11. Gebruik het product niet als u allergisch bent voor natriumchlorideoplossing.
12. Wanneer voor eenmalig gebruik bestemde hulpmiddelen opnieuw worden gebruikt, kan dit risico voor de patiënt of gebruiker opleveren. Dit kan verontreiniging veroorzaken en/of de werking aantasten, hetgeen letsel, ziekte en/of overlijden van de patiënt tot gevolg kan hebben.
13. Als zich een ernstig incident heeft voorgedaan met betrekking tot het hulpmiddel, moet dit worden gemeld aan Medline en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en / of patiënt is gevestigd.
14. Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het weggooien van dit hulpmiddel en de verwijdering van het hulpmiddel moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de bestaande ziekenhuis- of nationale regelgeving voor biologisch gevaarlijk afval.

⚠	Voorzichtig	⊘	Als kluis kunstetra, jos sen pakkaus on vaurioitunut
EC REP	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä	LOT	Erä numero
CE 0123	CE-merkintä: Laite täyttää keskeiset vaatimukset, jotka on asetettu lääkinnällisiin laitteisiin (Direktiivissä) 93/42/EEC	⊘	Älä uudelleen steriloi
	Valmistuspäivämäärä		Katso käyttöohjeet ennen käyttöä
	Valmistaja		Pidettävä poissa auringonvalosta
	Käytä päivämäärään mennessä	REF	Luettelonumero
	Pidettävä kuivana	STERILE R	Lääkinnällinen laite sisältää steriloitu säteilyä, kun se steriloitu käytettäessä käytetyt tai huumattuna
	Älä käytä uudelleen		Säilytetään säädellyssä lämpötilassa (10-30 °C).

Jiangsu Embrace Science & Technology Development Co., Ltd.
29-2 Yinghin Road, Huai'an Economic and Technological Development Zone, Jiangsu, Zip Code: 223001
www.emtdi.cn

EC REP **Riomavis S.L.**
Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039 Spain
Tel.: +34 658 396 230

CH REP **MedNet SWISS GmbH**
Grabenstrasse 3, 6039 Root D4, Switzerland

CE 0123

HOUDBAARHEIDSDATUM: 3 jaar

PRODUCTIEDATUM: Zie het etiket op de verpakking.

STERILISATIEMETHODE: Stoomsterilisatie.

BEWAREN: Bewaren bij gecontroleerde temperatuur (10-30 °C). Niet invriezen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

(ASEPTISCHE TECHNIEK AANHOUDEN GEDURENDE DE VOLLEDIGE PROCEDURE)

1. Open de verpakking van de spuit en haal de spuit eruit. Controleer de helderheid van de oplossing en controleer of de beschermende tipdop op de conus zit.
2. Duw de plunjerstang omhoog om de afdichting tussen de zuiger/plunjer en de cilinder los te maken voordat u de beschermende tipdop verwijdert.
3. Verwijder de beschermende tipdop door het op een aseptische manier af te draaien.
4. Verwijder de lucht door de plunjer naar voor te duwen.
5. Sluit op een aseptische manier de spoelspuit aan op de katheter en duw met de plunjerstang om het vereiste volume te spoelen volgens het beleid van de instelling.
6. Gooi de gebruikte spuit en de resten van de oplossing weg. NIET OPNIEUW GEBRUIKEN.



⚠	Let op	⊘	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
EC REP	Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap	LOT	Lotnummer
CE 0123	CE-markering: voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEG	⊘	Niet opnieuw steriliseren
	Productiedatum		Raadpleeg de gebruiksinstructies
	Fabrikant	REF	Catalogusnummer